

yuwell

**„Kontrolirajte razinu šećera
bilo kad i bilo gdje!“**

Anytime CT3

CGM sustav u
stvarnom vremenu



Upoznajte Anytime CT3 sustav



AUTOMATSKI APLIKATOR I SENZOR



01. Jednostavan auto-aplikator na jedan dodir lako umeće mali ugrađeni senzor ispod kože.

TRANSMITER (VIJEK TRAJANJA 2 GOD)



02. Punjivi transmitter može se koristiti do 2 godine. Na jednom punjenju podržava do 14 dana nošenja.


STALAK ZA PUNJENJE TRANSMITERA



03. Brzo punjenje traje manje od 1,5 sati za jedno punjenje.



480 kontinuiranih očitavanja dnevno šalje se na vaš telefon putem bluetootha.

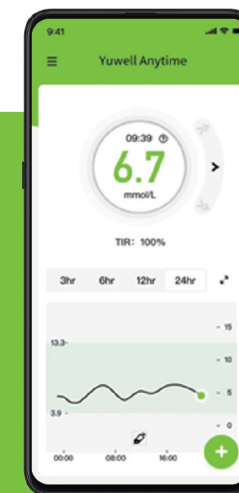

Ostvarite svoje ciljeve s Anytime CT3



bez uboda
u prste



bez skeniranja



ugodan za 14
dana nošenja



prilagodljivi
alarm i
upozorenja

JEDNOSTAVNIJE



Ostvarite svoje ciljeve s Anytime CT3



PAMETNIJI

- 7 linija trenda glukoze
- 4 opcije vremenske crte glukoze
- Mogućnost izvoza statistike i dnevnog izvještaja
- Dijeljenje podataka u stvarnom vremenu s do 20 osoba
- Omogućuje bilježenje obroka, vježbanja i inzulina





UČINKOVIT

- Visoka i niska upozorenja u stvarnom vremenu za poduzimanje radnji
- Može pomoći u smanjenju HbA1c
- Može pomoći u smanjenju hipoglikemijskih događaja




POUZDAN

Kliničko ispitivanje za sustav kontinuiranog praćenja glukoze CT3 upravo je dovršeno 2022. godine, a uključivalo je 72 pacijenta u tri vrhunske bolnice u Kini. Postignuti su ukupni MARD (u odnosu na vensku krv) od 9,07% i konsenzusna mreža pogrešaka od 99,95%.

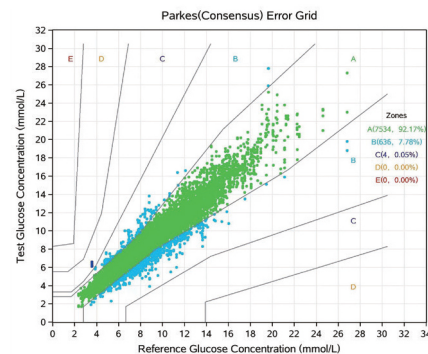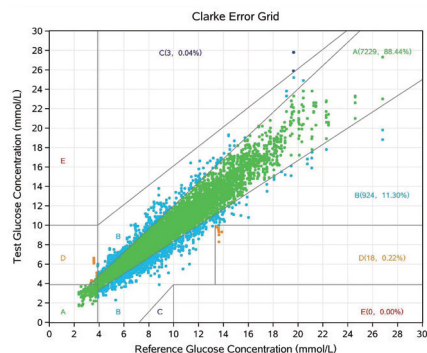

Bolje upravljanje s Anytime aplikacijom

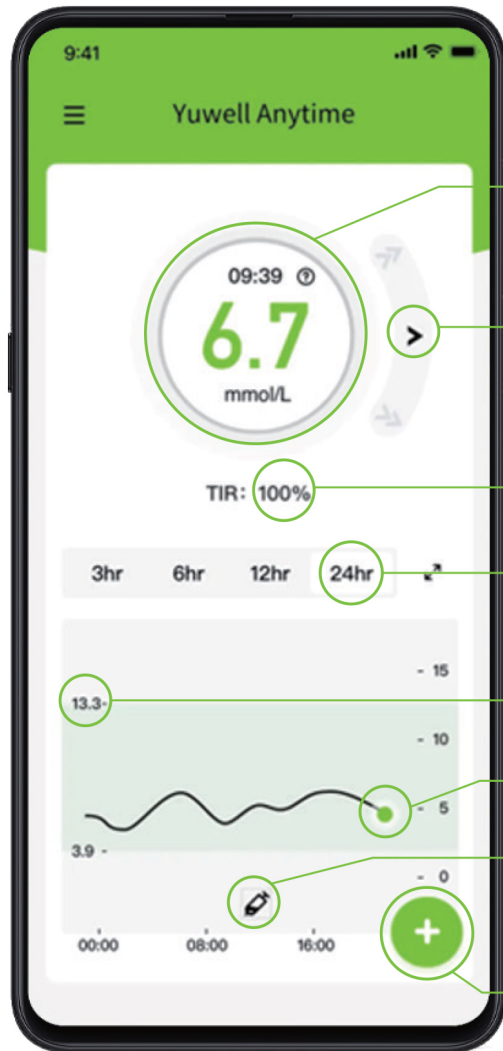

Trenutno očitavanje glukoze

Linije trenda

Vrijeme u dometu


Vremenski prikaz

Ciljni raspon

Grafikon trenda

Evidencija događaja

Dodajte događaje

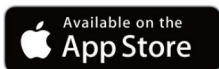


Anytime

SYNC

glooko

Pacijenti mogu:

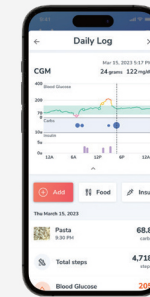

Glooko za privatne korisnike

- ✓ Unijeti i pregledati podatke o dijabetesu na jednom mjestu kako bi bolje razumjeli što im utječe na razinu glukoze.
- ✓ Sinkronizirati podatke s CT3.
- ✓ Bilježiti obroke i aktivnost - baza podataka ima preko 500.000 stavki, a Glooko je kompatibilan s popularnim aplikacijama za praćenje fitnessa kao što su Fitbit i Strava.
- ✓ Pregledajte obrazovne izvore i najbolje prakse o dijabetesu.

Profesionalci mogu:



web stranica za profesionalce

- ✓ Upravlajte svojom populacijom dijabetesa za skrb 24/7
- ✓ Pregledajte i analizirajte podatke o dijabetesu koje su pacijenti sinkronizirali na daljinu ili su ih učitali tijekom posjeta klinici
- ✓ Pronađite i grupirajte ciljane pacijente s mogućnostima pretraživanja i filtriranja. Učinkovito analizirajte i dajte smjernice skupinama pacijenata
- ✓ Poboljšajte učinkovitost tijekom rada i povećajte broj pacijenata

Anytime CT3 specifikacije



Transmitter	
Vrijeme korištenja	14 dana
Rok trajanja	2 godine
Vrijeme zagrijavanja	1 sat
Napajanje	punjiv
Dugovječnost baterije	14 dana sa jednim punjenjem
Vrijeme punjenja	< 1,5 sati
Domet i frekvencija komunikacije	6 metara, 2,4 GHz Bluetooth Low Energy (BLE)
Uvjeti skladištenja i transporta	Temperatura: 5 do 40°C; Vlažnost: <93% RH
Senzor	
Glukozni raspon	1,7 - 27,8 mmol/l
Vrijeme korištenja	14 dana
Rok trajanja	1 godina
Uvjeti skladištenja	Temperatura: 2 do 30°C; Vlažnost: nema posebnih zahtjeva
Transportni uvjeti	Temperatura: 2 do 45°C; Vlažnost: nema posebnih zahtjeva

yuwell

JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD


Manufacturing Address: No.1 Baisheng Road, Development Zone, Danyang, Jiangsu Province, P.R.China

Tel: 86-0511-8690 0859 86-0511-8690 0860

E-mail: yuwellsales@yuyue.com.cn; sales@yuyue.com.cn

www.yuwell.com

f | t | in | i | Yuwell Global


2023, Yuyue medical, all rights reserved. The "  ", yuwell, the yuwell logo and name are trademarked by Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd, and may not be distributed, modified, reproduced in whole or in part without the prior. All specifications and product configurations are subject to change without notification.

Anytime CT3

CGM sustav u stvarnom vremenu

Anytime CT3 sustav kontinuiranog praćenja glukoze je pametan i ugodan način da se pomogne dijabetičarima tipa 1 i tipa 2 u planu upravljanja.




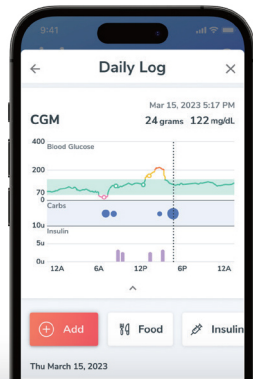


Glooko za privatne korisnike



Web stranica za profesionalce

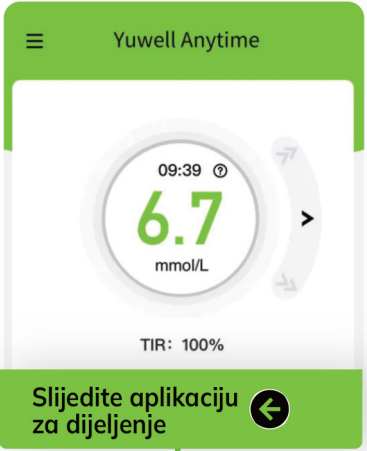

Slijedite aplikaciju za dijeljenje

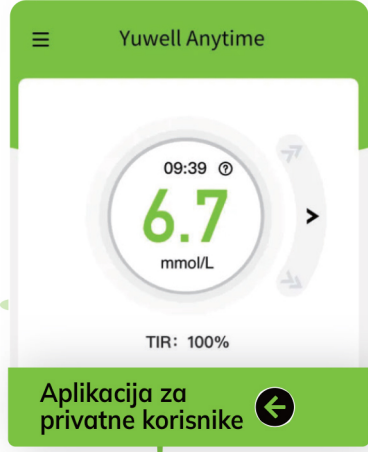

Aplikacija za privatne korisnike

Anytime!